

产品参数-闪测精灵Flash10

平均升温速率	不小于15℃/s (50℃-90℃)
平均降温速率	不小于15℃/s (90℃-50℃)
模块控温精度	不大于0.5℃
温度准确度	测定值与设置温度差值的绝对值不大于0.5℃
模块温度均匀性	温度差值应在±1℃范围内
温度持续时间准确度	温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内
荧光强度检测重复性	≤3%变异系数（CV,%）
荧光强度检测精密度	≤5%变异系数（CV,%）
检测通道	FAM、HEX、ROX、CY5；4个独立任务模块
检测通量	4个独立反应模块，可实现矩阵 4管/20分钟；12管/小时；288管/天
检测时间	加样1分钟，20分钟“样本进，结果出”
仪器尺寸	460mm(L)x320mm(W)x438mm(H)
仪器重量	30.5Kg



产品参数-闪测英雄Robo


平均升温速率	不小于15℃/s (50℃-90℃)
平均降温速率	不小于15℃/s (90℃-50℃)
模块控温精度	不大于0.5℃
温度准确度	测定值与设置温度差值的绝对值不大于0.5℃
模块温度均匀性	温度差值应在±1℃范围内
温度持续时间准确度	温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内
荧光强度检测重复性	≤3%变异系数（CV,%）
荧光强度检测精密度	≤5%变异系数（CV,%）
检测通道	FAM、HEX、ROX、CY5；16或32个独立任务模块
检测通量	16或32独立反应模块，兼具随到随检与批量检测 32管/30分钟；64管/小时；1500管/24h
检测时间	自动上样，卡盒装载时间：5分钟32个样本 检测时间：25分钟检测32个样本
样本回收	阴性样本置入医疗废物回收区；阳性样本置入阳性样本回收区，便于后续处理
仪器尺寸	1760 mm(L)x 960 mm(W)x 1890 mm(H)
仪器重量	980kg



闪测小闪舱™ 全集成一体化核酸检测卡盒

将传统多间实验室，集成为掌上迷你反应舱

闪测小闪舱采用PCR方法结合荧光探针检测技术，并将采样（可选），核酸提取、多重PCR扩增集成于一体的检测盒，检测盒内预装有磁珠、裂解液、漂洗液、复溶缓冲液及冻干检测试剂。样本加入后，通过仪器自动进行核酸提取、加样及扩增，从而实现在一个封闭式耗材内完成核酸检测全流程。

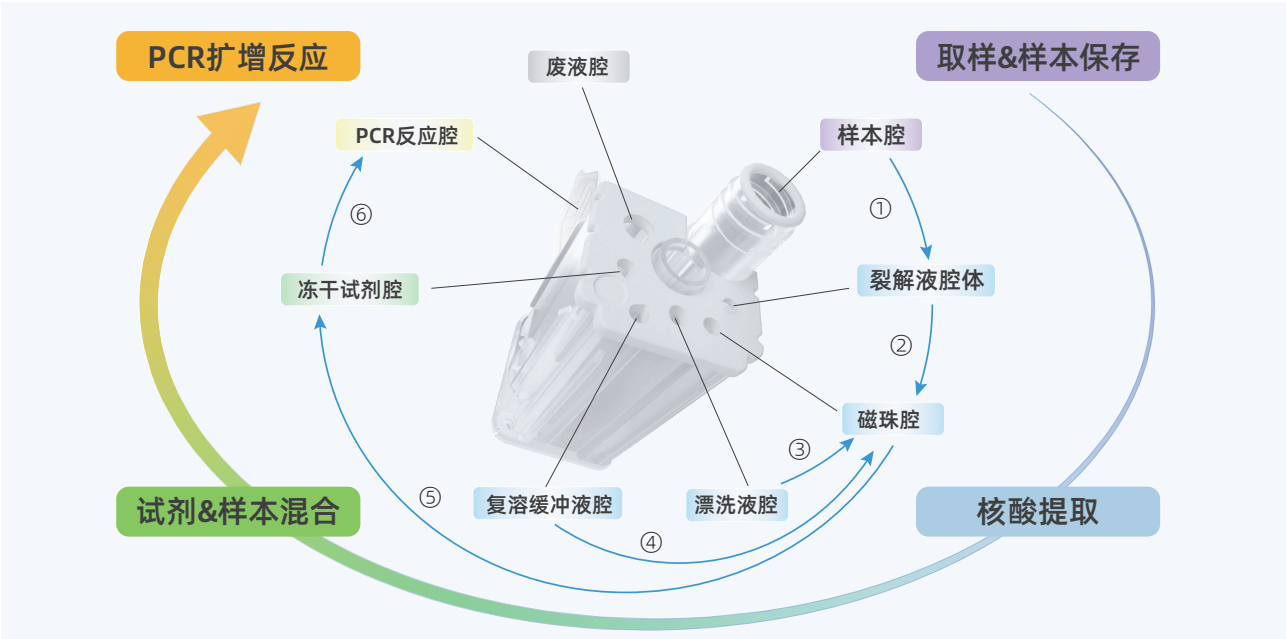

工作流程



应用场景



闪测小闪舱™ 检测卡盒菜单



媒介传播病原体检测卡盒

样本类型：血液	上样本量：300μL	检测时间：30分钟	
---------	------------	-----------	--

产品名称	检测类型	检测项目
蚊媒传染病多重核酸检测试剂盒	病毒	登革病毒
		基孔肯雅病毒
		黄热病毒
登革热病毒多重检测试剂盒	病毒	登革热病毒I型
		登革热病毒II型
		登革热病毒III型
		登革热病毒IV型
疟疾分型核酸检测试剂盒	原虫	间日疟原虫
		三日疟原虫
		恶性疟原虫
		卵形疟原虫
鼠疫杆菌核酸检测试剂盒	细菌	鼠疫杆菌